



KIDS ENT Workstation ユニット

CG100

長年ご愛用いただいているステンレス天板に
最新の標準機能を装備した
コンパクトユニット

Easy to
Use

Clean
&
Tidy

Reliable

Compact



基本仕様

品名	CG100
本体寸法	W650 × D530 × H800mm
重量 (照明装置含まず)	89kg
本体材質	ボディ (スチール) 天板 (ステンレス)
通気装置	押しボタン式
スプレー装置	綿巻シリコン管・フリージョイント式 3 本 (直 3 本)
エア供給	オイルフリーコンプレッサー 1 台 ステンレス製タンク 1 個 オートドレインシステム 1 個 高性能中空系フィルター 1 個
吸引装置	オイルフリー吸引ポンプ (床置き可能) 1 台 綿巻シリコン管・滑車式 1 個 (オプション: 外側引掛け式) 吸引瓶 強化ガラス製 3000ml 1 本
喉頭鏡ヒーター	熱風送風式 (サーモスタット & 温度ヒューズ付) 1 台
照明灯支柱 *	直ポール 49φ
薬瓶	共栓瓶 (白色 3 個、茶色 3 個、ルリ色 2 個) 軟膏ツボ (緑色 1 個、茶色 1 個)
入力電源	交流 100V 50/60Hz
消費電流	15A
電撃に関する保護の形式	クラス 1
電撃に対する保護の程度	BF 型装着部
による装着部分の分類	

* オプションとして照明装置 (照明灯ヘッド・照明灯ダブルアーム・照明灯 L 型アーム) が取付可能です。ご注文時にご指定ください。照明装置をご注文の場合は、照明灯支柱は照明灯装置と同様に白塗りです。
 【商品コード】照明装置: 1001802-117




スプレー関係商品は交換部品として別途販売

商品コード	商品名
1002150-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (太)
1002150-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (細)
1002150-3	耳鼻科ユニット用直結スプレー式 (曲)
1002156-1	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (透明)
1002156-2	耳鼻科ユニット用直結スプレー瓶 (茶色)
1002155	スプレー管

KIDS ENT Workstation ユニット CG100

【標準タイプ】 商品コード 1002194-1
 【照明装置付きタイプ】 商品コード 1002194-2

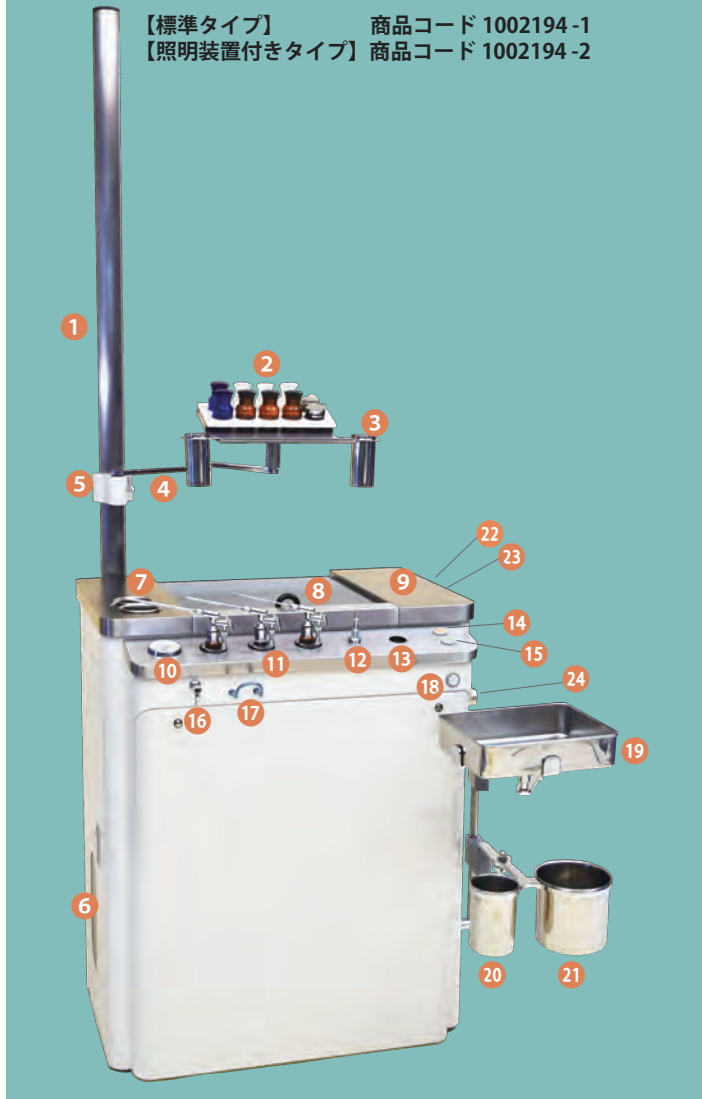

各部名称と付属品

- | | |
|----------------|--------------------|
| ① 照明灯支柱 | ②③ 吸引洗浄缶 |
| ② 薬瓶架 | ④ 汚物缶 |
| ③ 綿棒缶 45φ | ⑤ 吸引圧調整器 |
| ④ 薬瓶架アーム | ⑥ スプレー圧調整器 |
| ⑤ 薬瓶架用ブラケット | ⑦ 通気圧調整器 |
| ⑥ メンテナンス扉 | ⑧ 電源スイッチ |
| ⑦ 綿棒缶 60φ | ⑨ スプレー圧メーター |
| ⑧ 器械バット用スライド蓋 | ⑩ 吸引圧メーター |
| ⑨ ステンレス天板 | ⑪ コンプレッサーヒューズ (7A) |
| ⑩ 通気圧メーター | ⑫ 吸引ポンプヒューズ (7A) |
| ⑪ 直結スプレー | ⑬ 背面板 |
| ⑫ 吸引アダプタ (装着部) | ⑭ 関連機器接続用電源挿入口 |
| ⑬ 喉頭鏡ヒーター | ⑮ 当社製治療椅子用電源コンセント |
| ⑭ 照明灯スイッチ | ⑯ 本体ユニット電源コード |
| ⑮ 通気スイッチ | ⑰ 吸引瓶 |
| ⑯ 通気エア噴出口 | ⑱ 通気用フィルター瓶 |
| ⑰ 通気引掛け金具 | ⑲ 排気フィルター瓶 |
| ⑱ 喉頭鏡ヒータースイッチ | ⑳ 吸引フィルター瓶 |
| ⑲ 6×8 バット | |

製造販売業